




VELA Samba


VARIANT:

100/110/120/130/150


Manual. nr. 105579

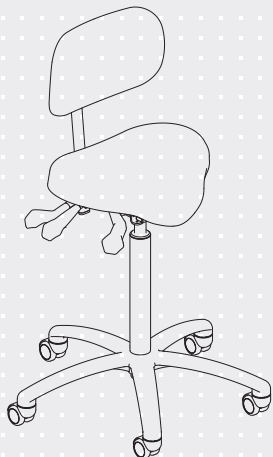


VELA Samba 100

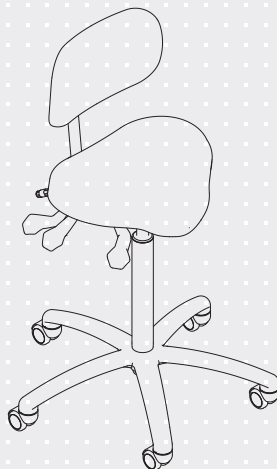


VELA Samba 110

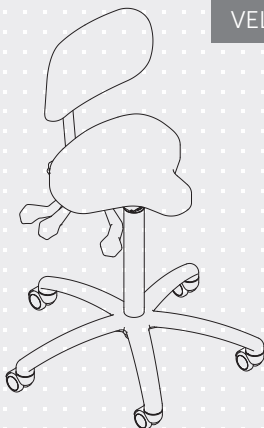

VELA Samba 120

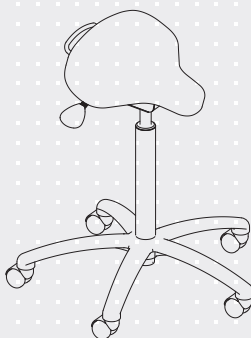

VELA Samba 130

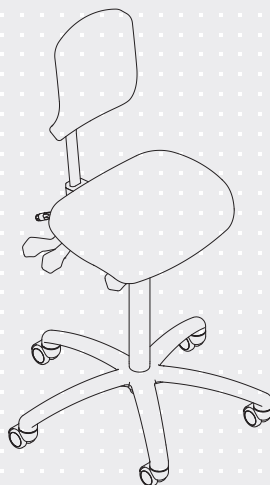

VELA Samba 150



ISO 9001
ISO 14001

Stolens utformning varierar beroende på modell

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0. INLEDNING	3
1.1. VARNINGAR	4
1.2. FELSÖKNING	5
1.3. ETIKETTER PÅ STOLEN	6
1.4. SÄKERHET	7
1.4.1. Avsedd användning	7
1.4.2. Transport	7
1.5. GARANTI	7
1.6. UPPPACKNING AV STOLEN	7
1.7. UNDERHÅLL	8
1.7.1. Hjul	8
1.7.2. Ram	8
1.7.3. Dyna	8
1.7.4. Återvinningsguide	8
1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING	8
1.9. ANVÄNDARMANUAL	10
1.9.1. Fästa Ryggstödet*	10
1.9.2. Höjdinställning med fotmanövrering*	10
1.9.3. Höjdinställning med grepp*	10
1.9.4. Höjdinställning med grepp (Samba 130)	10
1.9.5. Ställa in sätesvinkeln*	11
1.9.6. Ställa in sätesvinkeln (Samba 130)	11
1.9.7. Ställa in rygghöjd*	11
1.9.8. Ställa in ryggvinkeln*	11
1.9.9. Ställa in armstöd, höjd*	12
1.9.10. Ställa in armstöd, bredd*	12
1.9.11. Fotstöd ring*	12

1.0. INLEDNING

KÄRA KUND!

Grattis till din nya VELA/VELA Medical-stol! Vi är säkra på att du kommer njuta av denna stol varje dag. Denna bruksanvisning ger användbar information om justering, drift och underhåll av din stol.

Viktigt

Vänligen läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Denna manual finns också tillgänglig på VELA/VELA Medical:s webbplats: www.vela-stolar.se/www.vela-medical.com, där du också hittar annan relevant information.

Om du har frågor, upplever fel eller något händer oavsiktligt, vänligen kontakta din VELA-leverantör / VELA Medical-återförsäljare.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Vermund Larsen Sverige AB

C/O RSM Göteborg KB
Bohusgatan 15
411 39 Göteborg
Sverige
www.vela-stolar.se

VELA Medical

Gøteborgvej 8-12
9200 Aalborg SV
Danmark
www.vela-medical.com

1.1. VARNINGAR





Användning	Vid allergisk reaktion, sluta använda stolen och kontakta läkare
Användning	Använd endast originalreservdelar från VELA/VELA Medical
Användning	Gör inga ändringar av tillbehören som medföljer stolen
Användning	Använd endast stolen för det avsedda ändamålet
Användning	Justera endast sätesvinkeln och ryggstödsvinkeln medan användaren sitter i stolen och användarens fötter är på golvet
Användning	Använd aldrig stolen på ytor med nivåskillnader eftersom stolen kan bli instabil
Användning	Underhåll utom rengöring bör alltid utföras av en utbildad tekniker.
Användning	Utför aldrig underhåll på stolen medan den används
Användning	Följ alltid rekommenderade underhålls- och rengöringsinstruktioner
Användning	Stolens funktioner är avsedda för användaren. Endast användaren eller utbildade yrkesverksamma bör justera stolen medan användaren sitter i den
Användning	Risk för att skada eller klämma fingrarna i rörliga delar. Använd därför inte stolen om någon rör stolen under sätet
Kvävningsrisk	Kvävningsrisk - smådelar. Låt aldrig barn leka med stolen, eftersom små delar kan tas bort

1.2. FELSÖKNING

Fel	Möjlig orsak och lösning
Manuell höjdjustering fungerar inte	Det är för mycket last eller ojämn belastning på stolen. Försök justera höjden utan att sitta i stolen. Om detta inte fungerar är gaspatronen defekt och bör bytas ut. Kontakta din VELA/VELA Medical-leverantör
Stolen rullar dåligt	Hjulen är blockerade. Rengör hjulen från smuts och liknande.
Ryggstolpen glider ned	Dra åt handjusteringen ordentligt som visas i punkt 1.9.1. Du kan dra åt skruven hårt utan att skada produkten

Om ovanstående inte löser ditt problem, bör du kontakta din VELA/VELA Medical-leverantör.

1.3. ETIKETTER PÅ STOLEN

<p>Varning</p>	<p>Risk för klämskador: Håll händer och fingrar borta från rörliga delar</p>	
<p>Etiketter</p>	<p>60 x 22,5 mm</p> <p>De sista 6 siffrorna är produktens identitetssiffror (ID-nummer):</p>	

Etiketter på stolen ska läsas på ett avstånd av ca. 40 cm under normala dagsljusförhållanden.

För etiketter relaterade till stolens funktion, se avsnitt 1.9.

1.4. SÄKERHET

Denna stol är CE-märkt och uppfyller gällande EU-föreskrifter. Stolen är tillverkad av:

VELA/VELA Medical, Gøteborgvej 8-12, 9200 Aalborg SV, Danmark.

1.4.1. AVSEDD ANVÄNDNING

Denna anordning är avsedd att stödja en användare i sittande ställning när han eller hon utför dagliga aktiviteter inomhus, inklusive arbetsaktiviteter.

:: Stolen är inte byggd för att stå på

Alla varianter av denna stol är testade och godkända för en maximal belastning på 125 kg. För optimal användning är stolens rekommenderade användarvikt 40-110 kg.

1.4.2. TRANSPORT

Stolen är inte godkänd för användning som passagerarsäte i något transportmedel och får inte användas på detta sätt.

Stolen är utformad för att transporteras under följande miljöförhållanden:

Temperatur: - 20 ° C till + 60 ° C

Fuktighet: 15-95%

Låt stolen stå i 24 timmar före användning om den har lagrats under - 10 ° C.

1.5. GARANTI

VELA/VELA Medical beviljar rätt till anspråk enligt tillämplig lag i det land där stolen har förvärvat. Reklamationsrätten gäller endast vid användning av originaldelar och tillbehör, samt anpassningar gjorda av proffs. **Obs:** om ett exklusivt avtal har ingåtts direkt med VELA/VELA Medical, gäller detta!

VELA/VELA Medical åtar sig inget ansvar för skador på produkten eller användaren orsakade av:

:: Transport

:: Felanvändning

:: Normalt slitage

:: Felaktig användning

:: Användning av reservdelar och tillbehör som inte är VELA/VELA Medicals originalprodukter

:: Justeringar gjorda av obehöriga servicetekniker

1.6. UPPPACKNING AV STOLEN

Stolen transporteras i miljövänliga och återvinningsbara förpackningar.

Vid defekter eller transportskador på stolen, vänligen kontakta din VELA/VELA Medical-leverantör direkt. I sådana fall ska du inte försöka använda stolen eller reparera den själv.

Vid leverans har du fått:

:: VELA/VELA Medical-stol

:: Användarinstruktioner

Obs: se punkt 1.9.1 för korrekt fästning av ryggstödet.

1.7. UNDERHÅLL

Vi rekommenderar en årlig inspektion av stolen för att identifiera defekta eller slitna delar. Alla löstagbara delar ska dras åt regelbundet. Du hittar olika guider på www.vela-stolar.se/www.vela-medical.com.

1.7.1. HJUL

Vi rekommenderade att du regelbundet kontrollerar hjulen och tar bort eventuell smuts etc. Vissa golvtyper samlar smuts på hjulspåren. Rengör därför hjulspåren efter behov.

1.7.2. RAM

Rengör med ljummet vatten och tillsätt eventuellt ett pH-neutralt tvättmedel om det behövs.

1.7.3. DYNA

Tyg: Rengör med kemisk rengöring, med möbeltvätt eller med vatten med en hårt vriden trasa.

Syntetiskt tyg eller läder: Rengör med vatten eller mild tvål med en hårt vriden trasa.

Läder: Rengör genom att dammsuga med en mjuk borste. Undvik att använda tvättmedel.

Medicinska textilier: rengör som ovanstående. Det går dock även att använda desinfektionsmedel samt spritrenskning. För att se vilka specifika koncentrationer de olika typerna av klädsel kan hantera, se www.vela-medical.com

Obs: På www.vela-stolar.se/www.vela-medical.com kan du hitta rengöringsinstruktioner för alla våra typer av standardklädsel.

1.7.4. ÅTERVINNINGSGUIDE

Din VELA/VELA Medical-stol kan återanvändas av en annan person när du inte längre behöver den så länge stolen har genomgått service av en tekniker i förväg.

Stolens livslängd är fem år vid regelbunden och korrekt användning. Vi rekommenderar att VELA, din VELA-leverantör eller en utbildad tekniker utför en årlig serviceinspektion med byte av slitna delar.


1.8. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANtering

Denna produkt innehåller återvinningsbara material. Därför måste produkten kasseras i enlighet med lokala föreskrifter och inte tillsammans med vanligt hushållsavfall. Korrekt bortskaffande och återvinning hjälper till att förhindra negativa effekter på miljön och människor.

1.9. ANVÄNDARMANUAL

Merknad: Funktioner kan vara olika på stolar efter avtal med köpare.


Att byta ut gasfjädersnålen får endast göras av tekniker från VELA/VELA Medical eller av en person med relevant utbildning.

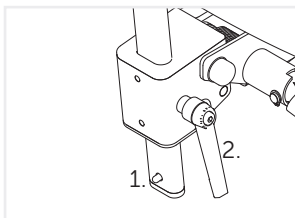

1.9.1. FÄSTA RYGGSTÖDET*


Tryck på låsstiftfjädersnålen (1) och skjut ryggstödsarmen genom hålet. Dra åt snabbspänningshandtaget (2) efteråt.

Obs: Ryggstödsarmen måste skjutas igenom helt och hålet så att stiftfjädersnålen låser ryggstödsarmen. Se till att ryggstödsarmen inte kan dras ut igen.

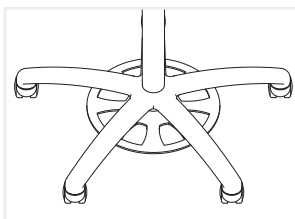


1.9.2. HÖJDINSTÄLLNING MED FOTMANÖVRERING*

Ställs in genom att man trampar på ringen på understället.

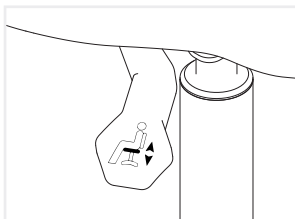

1.9.3. HÖJDINSTÄLLNING MED GREPP*


Ställs in genom att man drar det främsta greppet på höger sida uppåt.

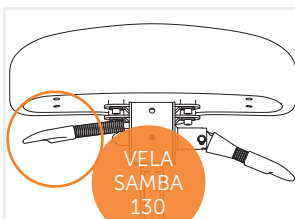

1.9.4. HÖJDINSTÄLLNING MED GREPP (SAMBA 130)


Ställs in genom att man drar i greppet på vänster sida.

Obs: Inställning av ryggstöds- och ryggvinkeln bör alltid göras med fötterna på golvet.

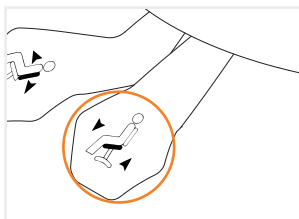


1.9.5. STÄLLA IN SÄTESVINKELN*

Ställs in genom att man drar det mittersta handtaget på höger sida uppåt.

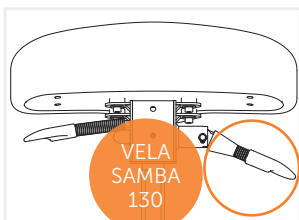


1.9.6. STÄLLA IN SÄTESVINKELN (SAMBA 130)

Ställs in genom att man drar i greppet på höger sida.

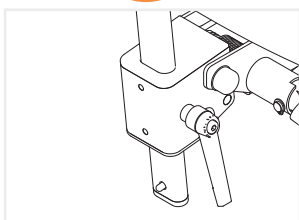

1.9.7. STÄLLA IN RYGGHÖJD*

Justera genom att lossa snabbspänningshandtaget på ryggstödet och reglera höjden. Kom ihåg att dra åt snabbspänningshandtaget igen.

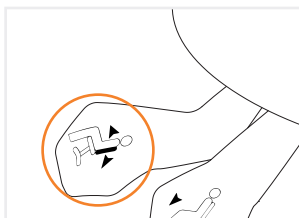


1.9.8. STÄLLA IN RYGGVINKELN*

Ställs in genom att man drar det bakersta handtaget på höger sida uppåt.


Använd bara handtaget när någon sitter i stolen - eftersom ryggstödet lutar framåt.

* Beroende på modell

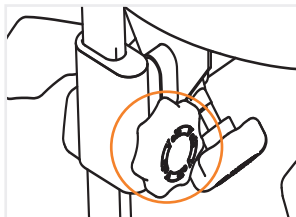


1.9.9. STÄLLA IN ARMSTÖD, HÖJD*

Ställs in genom att skruven på armstödsstängens lossas och höjden på armstödet regleras. Kom ihåg att dra åt skruven igen.
Obs: Armstödet kan tas bort helt genom att lossa armstöds skruv och dra upp armstödet.

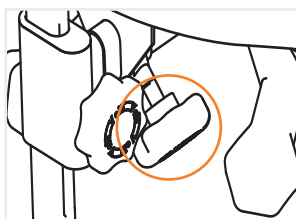

1.9.10. STÄLLA IN ARMSTÖD, BREDD*

Ställs in genom att man lossar skruven under sätet och reglerar armstödsbredden genom att dra ut armstödet. Kom ihåg att dra åt skruven igen.
Obs: Armstödet kan avlägsnas helt genom att trycka knop fjäderens som sitter inne i baren, i botten och dra av armstödet när handskruven lossas

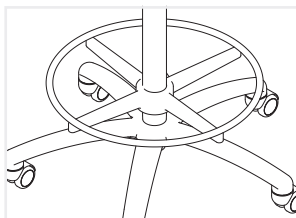

1.9.11. FOTSTÖD RING*

En fotstödring på 45 cm, justerbar i höjd. Fotstöds ring ger stabilitet, stöd och komfort i sittställning. En fotstödring är särskilt praktisk när användaren sitter högt upp.

* Beroende på modell